

Sterin™ विकिरण संकेतक - उपयोग के निर्देश

1. -50° C से कम या 50° C से ज्यादा के तापमान के संपर्क में न रखे - लंबे समय तक ज्यादा तापमान के संपर्क से बचें। उपयोग करने से पहले नीचे के दाहिने तापमान संकेतक की जांच करें। अगर तापमान संकेतक लाल/नारंगी है तो उपयोग न करें।
2. डिस्पेंसर बॉक्स में से एक Sterin™ संकेतक को वितरित करने के लिए स्पष्ट पट्टी को खींचें। इस से संकेतक के आगे की ओर का आसंजक सामने आजाएगा।
3. Sterin™ की जांच करके पुष्टि करें की वह "विकिरणित नहीं" दृश्य संदेश प्रदर्शित कर रहा है। यदि "NOT" शब्द दिखाई नहीं देता तो संकेतक का उपयोग न करें।
4. किनारों से संकेतक को पकड़कर, आर पार दिखने वाले कंटेनर में संकेतक रखें ताकि संकेतक का मुद्रित भाग बाहर की तरफ रहे।
5. उत्पाद के लिए आवश्यक खुराक के लिए संलग्न संकेतक से कंटेनर को विकिरणित करें। Sterin™ संकेतक पर मुद्रित न्यूनतम खुराक की तुलना में संपर्क खुराक की मात्रा बराबर या ज्यादा होनी चाहिए। (जैसे 70 Gy, 100 Gy, 125 Gy, 145 Gy)
6. संपर्क के बाद, संकेतक के केंद्र में विकिरण-संवेदनशील फिल्म का निरीक्षण करें यह पुष्टि करने के लिए कि यह पूरी तरह से अपारदर्शी है, "NOT" शब्द को कवर करता है ताकि संकेतक "विकिरणित" दृश्य संदेश प्रदर्शित कर सके। विकिरण से पहले और बाद में Sterin™ संकेतकों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं।




विकिरणित करने से पहले और बाद में Sterin™ के उदाहरण

प्रदर्शन सारांश: STERIN™ मुद्रित न्यूनतम सूचित खुराक पर या उससे ऊपर के विकिरण का स्थायी दृश्य सत्यापन प्रदान करता है।

अनुवादों के लिए, QR कोड स्कैन करें या

www.ashland.com/sterin पर जाएं

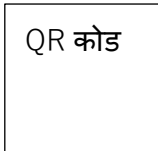

तापमान



संकेतक