

## Indicadores de irradiación Sterin™ - Instrucciones de uso


1. No exponer a temperaturas menores a  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$  o mayores a  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  - Evite la exposición prolongada a temperaturas elevadas. Verifique el indicador de temperatura ubicado en la parte inferior derecha antes de su uso. No lo utilice si el indicador de temperatura está de color rojo/anaranjado.
2. Tire de la banda transparente para dispensar un indicador Sterin™ de la caja expendedora. Esto expondrá el adhesivo en la parte delantera del indicador.
3. Verifique Sterin™ para confirmar que muestre el mensaje virtual "NO IRRADIADO". No utilice el indicador si no aparece la palabra "NO".
4. Sostenga el indicador por los bordes y adhiera el indicador al interior de un contenedor transparente de modo tal que el costado impreso del indicador esté orientado hacia afuera.
5. Irradie el contenedor con el indicador conectado en la dosis requerida para el producto. La exposición debe ser igual o mayor a la dosis mínima impresa en el indicador Sterin™ (p. ej., 70 Gy, 100 Gy, 125 Gy, 145 Gy).
6. Luego de la exposición, inspeccione la película sensible a la radiación en el centro del indicador para confirmar que sea completamente opaca y cubra la palabra "NO" para que el indicador muestre el mensaje visual "IRRADIADO". A continuación se ilustran ejemplos de indicadores Sterin™ antes y después de la irradiación.



Ejemplos de Sterin™ antes y después de la irradiación.

Resumen de rendimiento: STERIN™ proporciona una verificación visual permanente de la irradiación a la dosis mínima impresa indicada o a una dosis más alta.

Para consultar traducciones, escanee el código QR o visite [www.ashland.com/sterin](http://www.ashland.com/sterin)

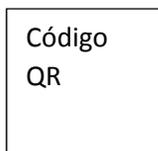

Indicador



de  
temperatura