

Indicadores de irradiação Sterin™ – Instruções de uso


1. Não exponha o produto a temperaturas inferiores a - 50 °C ou superiores a 50 °C – Evite exposição prolongada a temperaturas elevadas. Verifique o indicador de temperatura no canto inferior direito antes do uso. Não use o produto se o indicador de temperatura estiver vermelho/laranja.
2. Puxe a tira transparente para retirar um indicador Sterin™ da embalagem. O adesivo na parte frontal do indicador será exposto.
3. Verifique se o Sterin™ exibe a mensagem visual “NÃO IRRADIADO”. Não use o indicador se a palavra “NÃO” não estiver visível.
4. Segure o indicador pelas extremidades e cole-o na parte interna de um recipiente transparente, de modo que o lado impresso do indicador fique voltado para fora do recipiente.
5. Realize a irradiação do recipiente com o indicador de acordo com a dose do produto necessária. A dose de exposição deve ser igual ou superior à dose mínima impressa no indicador Sterin™ (por exemplo, 70 Gy, 100 Gy, 125 Gy, 145 Gy).
6. Após a exposição, inspecione a película sensível à irradiação no centro do indicador para verificar se ela está totalmente opaca e cobre a palavra “NÃO”, de modo que o indicador mostre a mensagem visual “IRRADIADO”. Exemplos de indicadores Sterin™ antes e depois da irradiação são dados abaixo.



Exemplos do Sterin™ antes e depois da irradiação

Resumo do desempenho: STERIN™ permite a verificação visual permanente da irradiação na dose mínima indicada ou acima dela.

Para obter a tradução, faça a leitura do código QR ou acesse www.ashland.com/sterin.

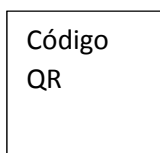

Temperaturas



Indicador