


## Sterin™ 輻照指示卡—使用說明


1. 不要暴露在溫度低於  $-50^{\circ}\text{C}$  或高於  $50^{\circ}\text{C}$ ，並避免長時間暴露在高溫下。使用前請檢查右下方溫度指示器。如果溫度指示器為紅色/橙色，請勿使用。
2. 拉動透明條，從分配器盒中釋出一個 Sterin™ 指示卡。這樣會露出指示卡正前方的黏合劑。
3. 檢查 Sterin™ 以確認它顯示「NOT IRRADIATED（未輻照過）」字樣。如果「NOT（未）」字樣不可見，請勿使用指示卡。
4. 握住指示卡的邊緣，將指示黏在「可透視」容器的內部，使指示卡的列印面朝外。
5. 將黏有指示卡的容器進行輻照，使其達到產品所需的劑量。輻照劑量應等於或大於印在 Sterin™ 指示卡上的最小劑量（例如 70 Gy、100 Gy、125 Gy、145 Gy）。
6. 輻照後，檢查指示卡中心的輻射敏感膠片，確認其完全不透明，覆蓋「NOT（未）」字樣，使指示卡只顯示「IRRADIATED（輻照過）」字樣。照射前後的 Sterin™ 指示卡的實例如下所示。

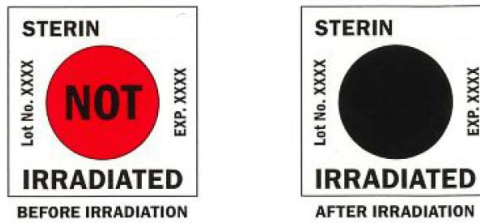

輻照前後的 Sterin™ 指示卡的實例

功效摘要：對以所載明之最小劑量或以上照射的輻照，STERIN™ 提供永久可視的照射驗證。

如需翻譯版本，請掃描二維條碼 (QR code) 或前往  
[www.ashland.com/sterin](http://www.ashland.com/sterin)

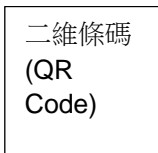

溫度



指示器